


EXTEND™ – temporäre Punctum Plugs

- Vorübergehende Linderung der Sicca-Symptome
- Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungsstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- Zum Test auf Wirksamkeit von dauerhaften Plugs
- Auch für obere Tränenwege geeignet

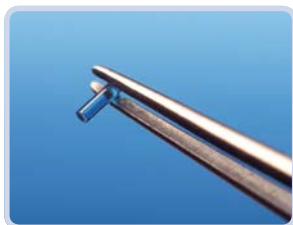

EXTEND™	temporäre synthetische Plugs, steril
Material	Copolymer aus Glykolsäure und Trimethylencarbonat
Färbung	Blau Nr. 6
Auflösungszeit	ca. 3 Monate
Implantation	per Pinzette (empf. Modelle 502A, 502B)

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A13-203-2	0,3 x 2,0 mm	2	05354292
A13-204-SP	0,4 x 2,0 mm	2	05354286
A13-205-SP	0,5 x 2,0 mm	2	05354263
A13-202	0,2 x 2,0 mm	20	07763155
A13-203	0,3 x 2,0 mm	20	05354346
A13-204	0,4 x 2,0 mm	20	05354317
A13-205	0,5 x 2,0 mm	20	05354323
A13-200	Kombipackung	20 (6 x 0,3; 8 x 0,4; 6 x 0,5)	05354085

Micro Flow™ – teildurchlässige Punctum Plugs

- Reduziert den Abfluss der Tränenflüssigkeit, ohne diesen vollständig zu verhindern
- Für Patienten mit moderaten bis ausgeprägten Sicca-Beschwerden
- Bei Kontaktlinsen-Intoleranz
- Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungsstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- Zur Behandlung der Tränenwegsstenose geeignet

Micro Flow™	teildurchlässige Punctum Plugs, steril vorgelesen auf einem Einweg-Injektor
Material	Silikon
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-401	klein (0,4 – 0,55 mm)	2	07690516
A14-402	mittel (0,55 – 0,7 mm)	2	07689134
A14-403	groß (0,7 – 0,85 mm)	2	07689128



Trockenes Auge – Tränenwegsverschlüsse

PARASOL® – dauerhafte Silikon Punctum Plugs

- Einfache Größenanpassung ohne Messung: die Größen Klein und Mittel decken nahezu das gesamte Patientenspektrum ab
- 92 % Retention* durch sichere Verankerung
- Steril vorgeladen auf Einwegapplikator – einfache und sichere Implantation
- Problemloses Entfernen bei Bedarf
- Reduzierung des Lagerumfangs durch weniger Größen

*McCabe C. Plugs reduce Dry-Eye Symptoms, Improve Vision: Review of Ophthalmology, Nov. 2009

Garantierter Halt

30 Tage Verlustgarantie ab dem Tag des Einsetzens

PARASOL® verbleibende Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor

Material medizinisches Silikon

Farbe transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-200	x-klein (0,25 – 0,35 mm)	2	05354139
A14-201	klein (0,35 – 0,65 mm)	2	05354151
A14-202	mittel (0,6 – 0,85 mm)	2	05354174
A14-203	groß (0,9 mm +)	2	05354197



Größenvergleichstabelle

herkömmliche Plugs	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm
PARASOL®	extraklein		klein		mittel		groß	

Smart Plug™ – dauerhafte Acryl Punctum Plugs

- Der dauerhafte thermodynamische Acryl Plug passt sich den anatomischen Gegebenheiten an
- Von außen nicht sichtbar
- Keine Messungen notwendig
- Kaum spürbar: gewebefreundliches, gelartiges Material
- Keine Dilatation erforderlich



Smart Plug™ verbleibende Punctum Plugs, steril

Material thermodynamisches hydrophobes Acrylpolymer

Färbung transparent

Übergangstemp. 32°C

Implantation per Pinzette (empfohlen Modell 502A)

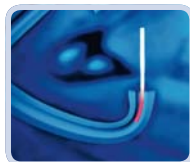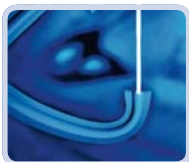

1. SMART PLUG™ wird mit einer Pinzette bis zu zwei Drittel in den Tränenweg eingeführt.

2. Bei Körpertemperatur schrumpft SMART PLUG™ in der Länge und dehnt sich in der Breite aus.

3. Nach ca. fünfzehn Sekunden ist der Tränenweg ausgefüllt.

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
500-6-2	0,4 x 6 mm	2	05354211
500-9-2	0,4 x 9 mm	2	05354228